

## Description:

Test strips for the determination of the silver concentration in fixing baths.

## Pack content:

1 aluminum container with 100 test strips

## Measuring range:

1–10 g/L Ag<sup>+</sup> resp.  
0.125–1.25 troy oz. / U.S.Gallon Ag<sup>+</sup>

## Color gradation:

0 · 1 · 2 · 3 · 5 · 7 · 10 g/L Ag<sup>+</sup> resp.  
0 · 0.125 · 0.25 · 0.375 · 0.625 · 0.875 · 1.25 troy oz. / U.S.Gallon Ag<sup>+</sup>

## Hazard warnings:

This test does not contain any hazardous substances that require mandatory labelling.

## General indications:

Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after removing a strip. Do not touch the test field.

## Additional indications:

1. QUANTOFIX® Silver cannot be used for fixing baths with pH values lower than 4.
2. To achieve a more exact determination of the silver content in concentrated solutions (more than 5 g silver per liter), dilute the solution with water in a ratio of 1:1 or 1:2. This will move the silver concentration value to the lower range of the test strip, where the reaction is the most sensitive.

## Instructions for use:

1. Dip the test strip shortly in the fixing bath.
2. Shake off excess liquid.
3. Wait 15 s.
4. Compare with the color scale.

Depending on the silver concentration, the yellow test field turns brown.

## Interferences:

Iron and copper ions will interfere, resulting in a false-positive reaction. These ions can be determined with the rapid tests QUANTOFIX® Total iron 100 (REF 913 44), QUANTOFIX® Total iron 1000 (REF 913 30) and QUANTOFIX® Copper (REF 913 04).





## Disposal:







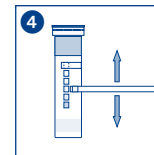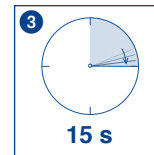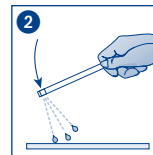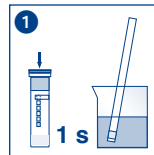


Used test strips can be placed in the normal household waste.

## Storage:

Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage temperature not above +30 °C).

If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packaging.



	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu		Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Produktionnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenerse asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		